


EasyFollow aplikacija

Vodič za brzi početak (mmol/L)

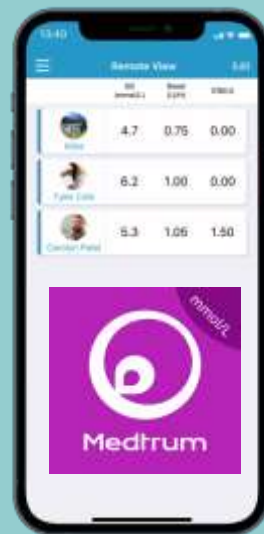


www.medtrum.co
m

Simplifying Diabetes
Medtrum

Pregled	1
Registracija i prijava	2
Mobilna podešavanja	3
EasyFollow podešavanja	4
Pokretanje daljinskog praćenja	5
Čitanje CGM sistema	7
Čitanje insulinske pumpe	8
Upozorenja	9

EasyFollow aplikacija

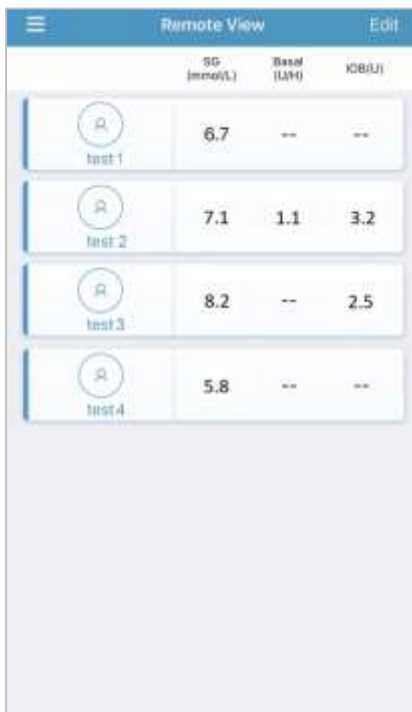

The screenshot shows the 'Remote View' of the EasyFollow application. It features a blue header bar with a menu icon on the left, the text 'Remote View' in the center, and an 'Edit' button on the right. Below the header is a table with four columns: a patient icon and name, 'SG (mmol/L)', 'Basal (U/H)', and 'IOB(U)'. There are four rows of data, each representing a patient labeled 'test 1' through 'test 4'.

	SG (mmol/L)	Basal (U/H)	IOB(U)
test 1	6.7	--	--
test 2	7.1	1.1	3.2
test 3	8.2	--	2.5
test 4	5.8	--	--

Pomoću Medtrum EasyFollow mobilne aplikacije, omogućeno je zdravstvenim radnicima ili članovima porodice da daljinski prate podatke o pumpi ili CGM-u u realnom vremenu.

Pacijent će prvenstveno primiti poruku na svom pametnom uređaju, da li dozvoljava drugom korisniku da prati njegove podatke.



Registracija i prijava

1. Instaliranje aplikacije

- **IOS** - Preuzeti EasyFollow aplikaciju sa Apple prodavnice.
- **Android** - Preuzeti EasyFollow aplikaciju sa Google prodavnice.

2. Registracija

- Pritisnuti **Register** (registracija) u donjem lijevom uglu.
- Unesite svoju email adresu.
- Pritisnuti **Get code** (zatražiti kod), zatim će Vam Medtrum na email adresu poslati verifikacioni kod.
- Unesite kod, vaše puno ime i lozinku.
- Nakon što ste pročitali i prihvatili uslove korišćenja, dodirnite **Create Account** (izradi račun).

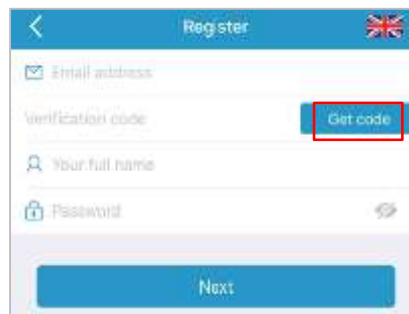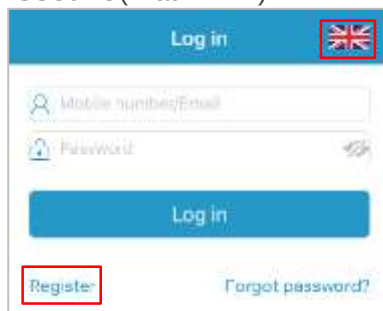

3. Prijava

U gornjem desnom uglu selektovati ikonicu nacionalne zastave koju ste odabrali prilikom registracije, zatim se prijavite sa svojim korisničkim imenom i lozinkom.

Preporučena podešavanja pametnog uređaja

Pogledajte uputstva za Vaš pametni uređaj kako biste znali da promijenite njegova podešavanja.

Ako ste instalirali aplikaciju na IOS uređaju:

- Provjerite je li aplikaciji dopuštena upotreba WLAN-a i mobilnih podataka.
- “Tihi režim” i “Ne uznemiravaj”: Isključeni.
- Pobrinite se da su obavještenja za Medtrum EasyFollow aplikaciju uključena.
- Pobrinite se da je aplikacija otvorena i da radi u pozadini.
- Restartujte aplikaciju prilikom restartovanja pametnog uređaja.

Ako ste instalirali aplikaciju na Android uređaj:

- Pobrinite se da je Vaš uređaj uvijek povezan sa internetom.
- Provjerite je li aplikaciji dopuštena upotreba WLAN-a i mobilnih podataka.
- “Tihi režim” i “Ne uznemiravaj”: Isključeni.
- Pobrinite se da je jačina zvuka dovoljno glasna kako biste čuli upozorenja i podsjetnike.
- Pobrinite se da je Medtrum EasyFollow aplikaciji dozvoljeno da šalje obavještenja dok koristite druge aplikacije.
- Pobrinite se da dozvoljavate aplikaciji pristup fotografijama, datotekama i medijima, kako biste odabrali profilnu sliku.
- Pobrinite se da je aplikacija otvorena i da radi u pozadini.
- Restartujte aplikaciju prilikom restartovanja pametnog uređaja.

EasyFollow podešavanja

1. Podešavanja zvuka

Glavni meni → Podešavanja → Opšta podešavanja → Mogućnosti zvučnih postavki

Preporučuje se da su **Audio** (zvuk) i **Vibrate** (vibracija) uključeni. Ako ih isključite postoji mogućnost da ćete propustiti upozorenja.





2. Podešavanja jedinice glukoze

Glavni meni → Podešavanja → Opšta podešavanja → Podešavanja jedinice

Jedinica za glukozu je fiksna, u zavisnosti od verzije aplikacije.



3. Dodavanje novog pacijenta

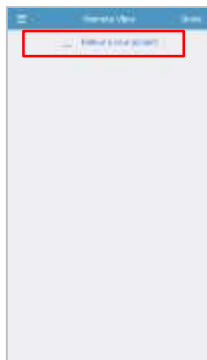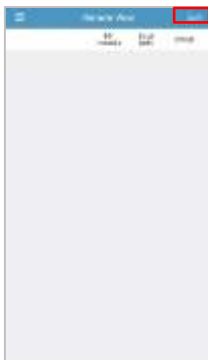

1. Pritisnuti **Edit** (urediti).
2. Pritisnuti **Follow a new patient** (praćenje novog pacijenta).
3. Upisati pacijentov email, zatim pritisnuti **Apply to remote view** (prijavi se za praćenje na daljinu).

Pokretanje daljinskog praćenja

1. Daljinsko praćenje naloga za EasyTouch aplikaciju



Ako osoba koju pratite koristi EasyTouch aplikaciju, možete vidjeti informacije o njenom stanju u realnom vremenu dodirom na njen nalog sa ekrana za daljinsko praćenje.



2. Daljinsko praćenje naloga za EasySense aplikaciju



Ako osoba koju pratite koristi EasySense aplikaciju, možete vidjeti informacije o CGM-u u realnom vremenu dodirom na njen nalog sa ekrana za daljinsko praćenje.




Podešavanja daljinskog praćenja

3. Daljinsko praćenje EasyPatch/EasySense naloga



Pritisnuti
EasyPatch/EasySense nalog
na početnom ekranu
(praćenje na daljinu).

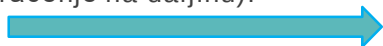

Insulinska pumpa.




Insulinska pumpa sa
glukoznim senzorom

4. Podešavanja za svakog pacijenta



Bilješka: Kada promijenite podešavanja na EasyFollow aplikaciji, podešavanja na EasyTouch/EasySense/EasyPatch aplikacijama neće biti promijenjena.

Grafikon predstavlja krivu nivoa glukoze u toku 24h. Vrijednost glukoze od 3.1mmol/L prikazuje se kao crvena linija.

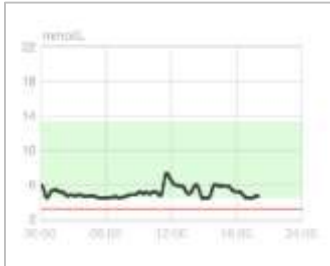

Ako želite da vidite više informacija sa senzora, pritisnite na CGM sistem.



Stanja senzora:

- **Praćenje:** senzor i transmitter rade ispravno, i transmitter šalje podatke sa senzora na pametni uređaj..
- **Greška kalibracije:** poslednja kalibracija je neuspešna.
- **Izgubljen senzor:** signal senzora je izgubljen.
- **Senzor je istekao:** vijek trajanja senzora je istekao.
- **Nema očitavanja:** senzor ne funkcioniše ispravno i nema očitavanja.
- **Kvar senzora:** senzor je neispravan.
- **Greška transmitera:** transmitter ne radi pravilno.
- **Povezivanje senzora:** transmitter nije adekvatno povezan sa senzorom.

Čitanje insulinske pumpe

Grafikon prikazuje današnje zapise o bazalnoj i bolusnoj isporuci insulina. Svaka doza bolus insulina prikazana je kao plavi vrh.



Ako želite da vidite više informacija, pritisnite na grafikon.



Status insulinske pumpe u realnom vremenu:

- **Dostavljanje bazalnog insulina:** kada je pumpa u procesu dostavljanja bazalnog insulina.
- **Dostavljanje normalnog bolus insulina:** kada je pumpa u procesu dostavljanja normalnog bolus insulina.
- **Dostavljanje proširenog bolus insulina:** kada je pumpa u procesu dostavljanja proširenog bolus insulina.
- **Pauza:** kada je isključena svaka dostava insulina.
- **Izgubljena pumpa:** izgubljen signal pumpe.
- **Detektovana okluzija:** kada je pumpa začepljena.
- **Prazan rezervoar:** kada nema više insulina u pumpi.
- **Istekao rezervoar:** kada je istekao rok upotrebe rezervoara.
- **Greška rezervoara:** kada rezervoar ne radi ispravno.
- **Baterija prazna:** kada je baterija rezervoara prazna.
- **Greška na bazi pumpe:** kada baza pumpe ne radi ispravno.
- **Prekoračen maksimalni dnevni opseg:** kada je prekoračena maksimalna dnevna doza insulina.
- **Prekoračen maksimalni časovni opseg:** kada je prekoračena maksimalna časovna doza insulina.
- **Automatsko isključivanje:** Kada korisnik nije pritisnuo nijedno dugme na PDM-u u određenom vremenskom period, pa je dostava insulina prekinuta.

Upozorenja:


Upozorenja se pokreću usled uslova koji zahtevaju Vašu pažnju. Nemojte ih ignorisati!

Brisanje upozorenja:

- Pročitajte poruku upozorenja na aplikaciji.
- Pritisnite **OK** da biste potvrdili upozorenje.
- Pratite uputstva u poruci upozorenja.



Aplikacija radi u pozadini

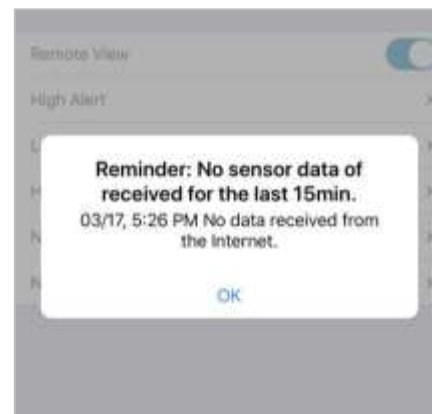

Rad aplikacije tokom njenog korišćenja

Primjeri upozorenja

Poruke na aplikaciji	Radnje koje treba preduzeti
Visok nivo glukoze	Provjeriti nivo glukoze u krvi
Nizak nivo glukoze	Provjeriti nivo glukoze u krvi
Nivo glukoze ispod 3.1 mmol/L	Provjeriti nivo glukoze u krvi
Nema podataka sa senzora	Provjeriti status senzora
Nema podataka sa pumpe	Provjeriti status pumpe



Medtrum Technologies Inc.
7F, Building 8, No. 200, Niudun Road
Shanghai 201203, China

Tel: +86-21-50274781

Fax: +86-21-50274779

www.medtrum.com



Medtrum B.V.
Nijverheidsweg 17
5683 CJ Best
The Netherlands
Tel: +31 (0) 499745037

CE 0197

This product complies with Directive 93/42/EEC
(MDD) and Directive 2014/53/EU (RED).

MD-TL-008
IM889008WW
348481
Version: 1.01

Simplifying Diabetes

Medtrum