



Medtrum EasyView Website

Korisničko uputstvo





Humalog® je trgovačka marka Eli Lilly i Kompanije.

NovoRapid® je trgovačka marka Novo Nordisk A/S.

Apidra® je trgovačka marka Sanofi S.A.



Medtrum Technologies Inc.


7F, Building 8, No. 200, Niudun
Road

Shanghai 201203, China

Tel: +86-21-50274781

Fax: +86-21-50274779

www.medtrum.com

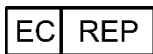

Medtrum B.V.

Nijverheidsweg 17

5683 CJ Best

Holandija

Tel: +31 (0) 499745037

CE 0197

Ovaj proizvod je u skladu
sa Direktivom 93/4kDD) i

Direktivom 2014/53/EU (RED).

REF SY-018

Verzija: 1.6

Datum objave:

18 Februar, 2021

UG889000WW-001

348228

1 Uvod.....	1
1.1 Dokumenti.....	1
2 Početak	3
2.1 Otvaranjeveb-sajta.....	3
2.2 Registracija	3
2.3 Prijavljivanje.....	6
3 Podešavanja	9
3.1 Podešavanja izvještaja.....	9
3.2 Podaci za pregled	10
4 Praćenje	13
4.1 CGM.....	13
4.2 Insulinska pumpa.....	15
5 Izvještaji.....	19
5.1 Komandna tabla	19
5.2 Dnevni pregled	22
5.3 Pregled po danima.....	23
5.4 Prozor senzora	25
5.5 Analiza trendova.....	27
5.6 Događaji	30
5.7 Dnevnik	32
5.8 Upozorenja	34
5.9 Pregled podešavanja uređaja.....	35
6 Zapisi.....	41
7 Brzo štampanje.....	42
8 Konekcije, profil i šifra	45

8.1 Konekcije.....	45
---------------------------	-----------

8.2 Profil.....	47
8.3 Promijena šifre	48

Medtrum EasyView veb-sajt Vam omogućava pregled podataka sa insulinske pumpe i CGM uređaja u realnom vremenu kao i prethodne zapise, koji mogu da se koriste za generisanje izvještaja.

1.1 Dokumenti

- ✓ Medtrum EasyTouch App korisničko uputstvo
- ✓ Medtrum EasyPatch App korisničko uputstvo
- ✓ Medtrum EasyViewiPad App korisničko uputstvo
- ✓ TouchCare® System korisničko uputstvo
- ✓ EasySense® Disposable CGM System korisničko uputstvo

2.1 Otvaranje veb-sajta

Podržani operativni sistemi i veb pretraživači:

OS: Windows 7, Windows 8, Windows 10

Pretraživači: Google Chrome 61.0 i noviji, Firefox 56.0.2 i noviji, IE11 i noviji, Microsoft Edge 41 i noviji.

OS: Mac OS 10.10.5 i noviji


Browser: Safari 8.0.8 i noviji

Idite na sledeći veb-sajt:


<https://easyview.medtrum.eu>

2.2 Registrujte se

Ukoliko još uvijek nemate Medtrum nalog, kliknite na **Sign up now** (Registrujte se).

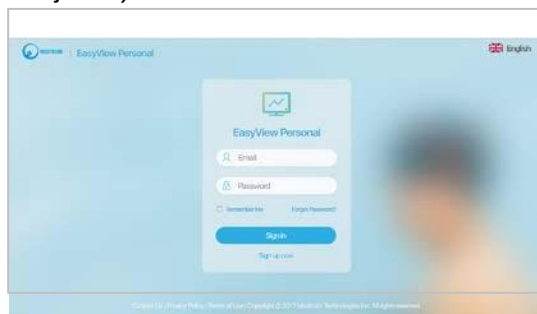

Sada se nalazite na ekranu za registraciju. Pratite sledeće korake kako biste napravili Vaš lični Medtrum nalog.

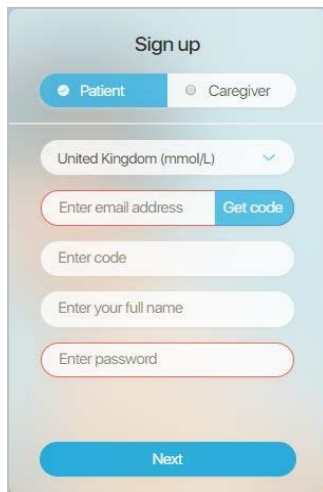


The image shows a mobile app sign-up screen. At the top, it says 'Sign up'. Below that are two radio buttons: 'Patient' (selected) and 'Caregiver'. Then there is a dropdown menu showing 'United Kingdom (mmol/L)'. Below the dropdown are four input fields: 'Enter email address' (with a 'Get code' button next to it), 'Enter code', 'Enter your full name', and 'Enter password'. At the bottom is a large blue 'Next' button.

1. Odaberite **Patient** (Pacijent).
 2. Odaberite Vašu zemlju/regiju sa liste.
 3. Unesite validnu email adresu kao naziv Vašeg naloga.
 4. Kliknite na **Get code** (Traži kod) i dobićete šestocifreni verifikacioni kod na email od Medtrum tima. Molim Vas da provjerite neželjenu poštu u slučaju da je email otišao tamo.
 5. Unesite šestocifreni verifikacioni kod. Vodite računa da imate 10 minuta da unesete kod prije njegovog isteka, i ukoliko kod istekne moraćete da tražite novi verifikacioni kod i da unesete poslednji kod koji Vam je poslat.
 6. Unesite Vaše puno ime kako bi Vas vaš lijeekar lako identifikovao.
 7. Kreirajte šifru i zapamtite je.
- ✓ Šifra mora da sadrži karaktere iz tri od sledeće četiri kategorije:
- Velika slova abecede (A do Z)


Nakon što Vam je kreiran nalog, možete da se prijavite.

2.3 Prijava

Ukoliko imate registrovan nalog u Medtrum EasyTouch mobilnoj aplikaciji ili Medtrum EasySense mobilnoj aplikaciji, možete direktno da se prijavite:

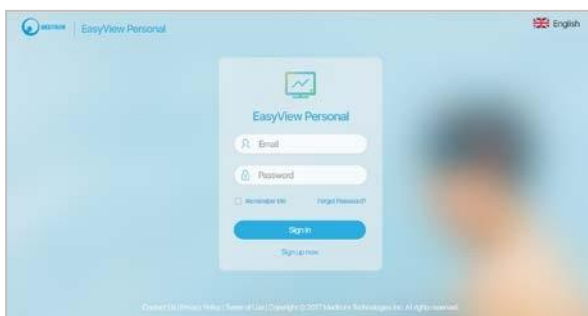

1. Kliknite na ikonicu zastave u gornjem desnom uglu, i sledeći prozor će se otvoriti:

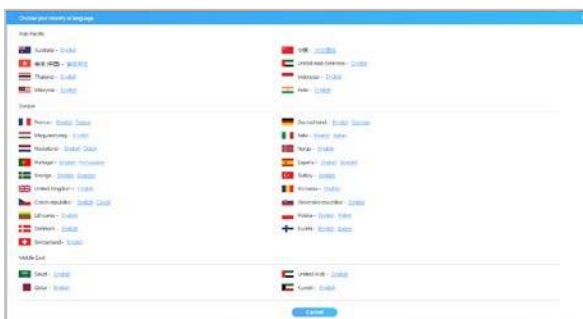

Odaberite zemlju/regiju koju ste odabrali prilikom registracije.

2. Unesite Vašu email adresu i šifru.
3. Kliknite na **Sign in** (Prijavite se).

Nakon što ste se prijavili, vidjećete **Monitor** (Praćenje ekrana). Kliknite na **Settings** (Podešavanja) na plavoj liniji kako biste pristupili ekranu za podešavanja.



3.1 Podešavanja izvještaja

Možete da upalite ili ugasisite upozorenja (**Show alerts**). Ukoliko su upaljena, upozorenja i zabilježeni alarmi će se vidjeti u izvještajima.

Podesite **Glucose Target Range** (Ciljni opseg glukoze) koji će se koristiti u sledećim grafikonima: **Dashboard** (Komandna tabla), **Daily Summary** (Dnevni izvještaj), **Day by Day Overview** (Pregled po danima), **Sensor Overlay** (Prozor senzora), **Trend Analysis** (Analiza trendova), i **Logbook** (Dnevnik).

Report Settings | Data to view | Save | Cancel

Report Settings (mmol/L)

Show alerts: ☒ On

Glucose Target Range

Overall: 5.0 - 7.8

Hypoglycemia: 2.1

		Glucose Target Range		Time Period		Post Meal Analysis	
		Low	High	From	To	From	To
Breakfast	Before	3.7	7.2	07:00	08:15	1.00	3.00
	After	5.6	8.9				
Lunch	Before	5.1	7.2	12:00	13:00	1.00	3.00
	After	5.6	8.9				
Dinner	Before	3.9	7.2	18:00	19:00	1.00	3.00
	After	5.6	8.9				
Night-time		5.6	8.9	23:00	03:00		

Restore defaults


Podešavanja

Podesite vrijeme doručka, ručka i večere, koja će biti korišćena u grafikonima **Day by Day Overview** (Pregled po danima) i **Logbook** (Dnevnik).

Kliknite na **Save** (Sačuvaj) da biste promijenili podešavanja.

3.2 Podaci za pregled

Kliknite na **Data to view** (Podaci za pregled) kako biste pristupili tom ekranu.

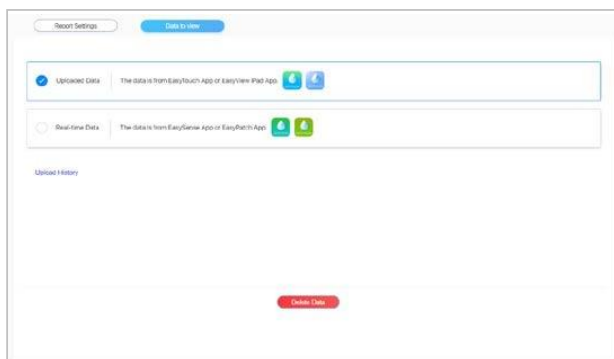

Ukoliko koristite TouchCare® Sistem sa Medtrum EasyTouch aplikacijom ili EasyView iPad aplikacijom, molimo Vas da odaberete **Uploaded Data** (Otpremljeni podaci).

Ukoliko koristite EasySense® CGM Sistem ili EasyPatch® Sistem, molimo Vas da odaberete **Real-time Data** (Podaci u realnom vremenu).

Napomena: Molimo Vas da pročitate Medtrum EasyTouch App korisničko uputstvo o tome kako se koristi aplikacija sa Vašim TouchCare® Sistemom.


Napomena: Možete da kliknete na **Delete Data** (Izbriši podatke) kako biste izbrisali i podatke u stvarnom vremenu i otpremljene podatke.

Kliknite na **Monitor** (Praćenje) na plavoj liniji kako biste pristupili ekranu za praćenje.



Ukoliko trenutno koristite Medtrum proizvod koji je povezan sa Medtrum aplikacijom preko Bluetooth konekcije, a Vaša aplikacija ima pristup internetu, moći ćete da vidite sve podatke sa Vašeg uređaja preko **Monitor** (Praćenje) ekrana.

4.1 CGM

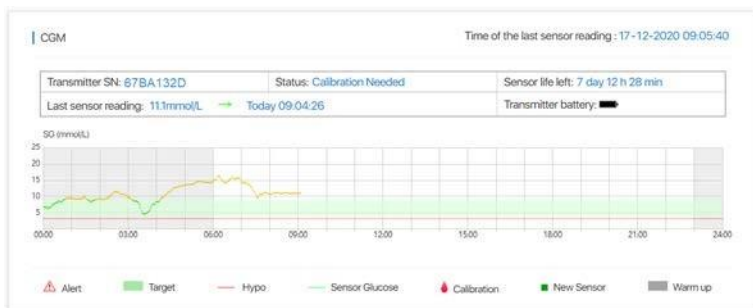


Ukoliko koristite senzor glukoze, vidjećete podatke sa senzora u realnom vremenu u CGM sekciji, uključujući:

- i. Vrijeme kada je poslato poslednje očitavanje senzora na cloud.
- ii. Serijski broj transmitera koji se trenutno koristi.
- iii. Status:
 - **Monitoring** (Praćenje) kada i senzor i transmitter rade pravilno, i kada transmitter šalje podatke sa senzora u aplikaciju.

Praćenje

- **Calibration Error** (*Greška u kalibraciji*) kada je poslednja kalibracija neuspješna.
 - **Lost Sensor** (*Izgubljen senzor*) kada se signal senzora izgubi u aplikaciji.
 - **Sensor Expired** (*Istekao senzor*) kada je istekao 14-dnevni vijek trajanja senzora.
 - **No Readings** (*Nema očitavanja*) kada senzor ne radi pravilno.
 - **Sensor Failure** (*Kvar senzora*) kada postoji problem u radu trenutnog senzora.
 - **Transmitter Error** (*Greška transmitera*) kada transmitter ne radi pravilno.
 - **Connecting Sensor** (*Povezivanje senzora*) kada transmitter nije pravilno povezan sa aktivnim senzorom.
 - **Charging Battery** (*Punjenje baterije*) kada se baterija transmitera puni.
 - **Battery Charged** (*Baterija napunjena*) kada je baterija transmitera kompletno napunjena.
- iv. Preostali vijek trajanja senzora
 - v. Poslednje očitavanje senzora primljeno preko Bluetooth-a
 - vi. Baterija transmitera
 - vii. Kriva očitavanja glukoze senzorom
 - viii. Evidencije kalibracija
 - ix. Oznaka pokretanja novog senzora
 - x. Periodi zagrijavanja
 - xi. Oznake upozorenja

4.2 Insulinska pumpa

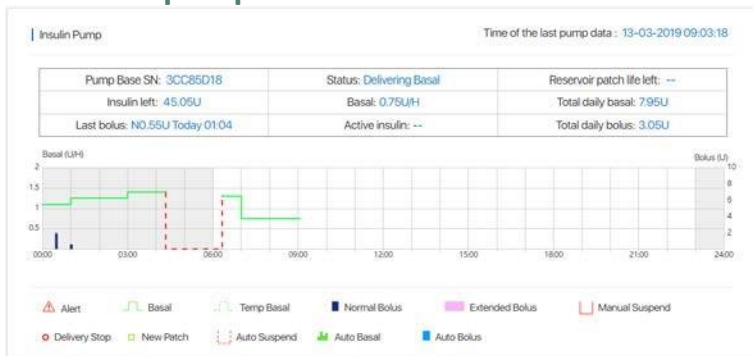

Ukoliko koristite insulinsku pumpu, vidjećete sledeće podatke iz pumpe u **Insulin Pump** (Insulinska pumpa) sekciji, uključujući:

- Vrijeme kada su poslednji put poslani podaci sa pumpe na cloud.
- Serijski broj baze pumpe koja se trenutno koristi.
- Status pumpe:
 - **Delivering Basal** (*Isporučivanje bazalnog*) - kada pumpa isporučuje bazalni insulin.
 - **Delivering Normal Bolus** (*Isporučivanje normalnog bolusa*) - kada pumpa isporučuje normalan bolus.
 - **Delivering Extended Bolus** (*Isporučivanje produženog bolusa*) - kada pumpa isporučuje produženi bolus.
 - **Suspend** (*Obustavljeno*) - kada je isporuka insulina obustavljena.
 - **Lost Pump** (*Izgubljena pumpa*) - kada je PDM uređaj/aplikacija izgubila signal pumpe.
 - **Occlusion Detected** (*Detektovana okluzija*) - kada je pumpa zapušena.
 - **Empty Reservoir** (*Prazan rezervoar*) - kada nema insulina u pumpi.

Praćenje

- **Patch Expired** (*Rezervoar je istekao*) - kada istekne rezervoar.
 - **Patch Error** (*Greška rezervoara*) - kada rezervoar ne radi pravilno.
 - **Patch Battery Depleted** (*Oslabljena baterija rezervoara*) - kada je baterija rezervoara istrošena.
 - **Pump Base Error** (*Greška baze pumpe*) - kada baza pumpe ne radi pravilno.
-
- iv. Preostali vijek trajanja rezervoara
 - v. Preostala količina insulina u rezervoaru
 - vi. Trenutna bazalna stopa
 - vii. Ukupna količina bazalnog insulina koja je isporučena
 - viii. Poslednja bolus doza
 - ix. Aktivni insulin
 - x. Ukupna količina bolus insulina koja je isporučena

Kliknite na **Reports** (Izveštaji) na plavoj liniji kako biste pristupili ekranu izveštaja.



Pronaći ćete analizu podataka senzora ili pumpe u 9 izveštaja: **Dashboard** (Komandna tabla), **Daily summary** (Dnevni izveštaj), **Day By Day Overview** (Pregled po danima), **Sensor Overlay** (Prozor senzora), **Trend Analysis** (Analiza trendova), **Events** (Događaji), **Logbook** (Dnevnik), **Alert** (Upozorenja) i **Device Settings Review** (Pregled podešavanja uređaja). Kada promijenite krajnji datum na jednom od izveštaja, krajnji datumi na svim ostalim izveštajima će se automatski ažurirati.



5.1 Dashboard

Izveštaj kontrolne table se koristi za pregled statistika očitavanja CGM sistema, BG očitavanja, isporučivanje insulina, unos ugljenih hidrata, vrijeme vježbanja, kao i standardnu devijaciju (SD) i broj unosa (#). Procenjeni A1C se izračunava iz vrijednost glukoze iz senzora (SG).


Izveštaji

Glucose Statistics									
BG		CGM		Insulin		Carbs		Exercise	
Average		Average		Average Daily Dose		Average Carbs/Day		Average time/Day	
9.4 mmol/L		9.1 mmol/L		37.33 U		44 g		--	
SD	#	SD	#	SD	# days	SD	#	SD	#
3.17	30	3.46	4901	2.57	4	18.6	6	--	--

Estimated A1C: 7.3% calculated from SG values

Note: Estimated A1C does not replace lab measurement

Drugi dio prikazuje izvještaj u procentima, u kom možete da pregledate distribuciju SG u određenim trenucima u danu, tokom odabranih dana.

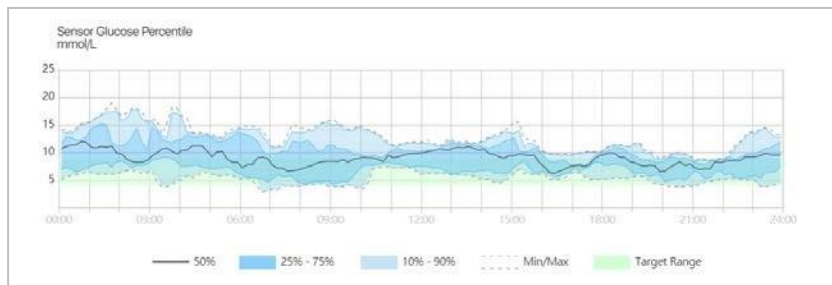

Treći dio izvještaja uključuje detaljne statistike o glukozu i isporučivanju insulina. Ovdje takođe možete da pregledate distribuciju glukoze i insulina u odabranim danima u obliku pita grafikona.



Možete da podesite period klikom na **Set** (Podesi), i potom odabirom trajanja i krajnjeg datuma.

Set period
×

Duration
7 days

From
19-10-2017
To
25-10-2017

Apply
Cancel

Ovaj izveštaj možete da odštampate jednostavnim klikom na **Print** (Štampaj).

5.2 Dnevni izvještaj



Ovaj izvještaj obuhvata krivu glukoze iz senzora, oznake kalibracije, bazalne stope, bolus doze, upozorenja, unose ugljenih hidrata i unose vježbanja u odabranom danu.



Pomijeranjem miša po krivama, možete vidjeti detaljnije informacije.



Podrazumijevani datum je uvijek poslednji datum prije otvaranja veb-sajta.


Možete da promijenite datum klikom na **Date** < 24/10 2017 > i odabirom datuma u kalendaru.

Možete da odštampate ovaj izvještaj jednostavnim klikom na **Print** (Štampaj).


5.3 Day by day overview




Ovaj izvještaj obuhvata očitavanja glukoze glukometrom, krive glukoze iz senzora, krive isporučivanja insulina, i unos ugljenih hidrata od 7 ili 14 dana. Podrazumijevani period je 7 dana.

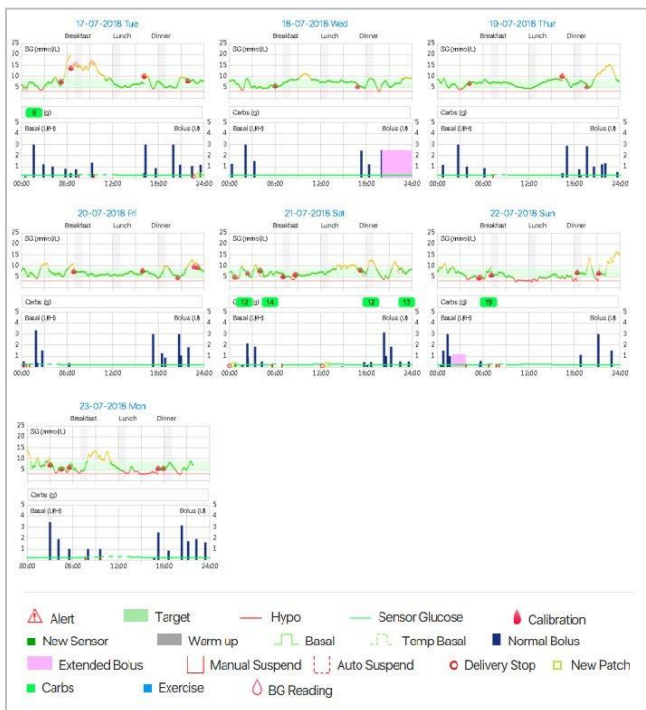

Pomijeranjem miša po krivama, možete vidjeti detaljnije informacije.

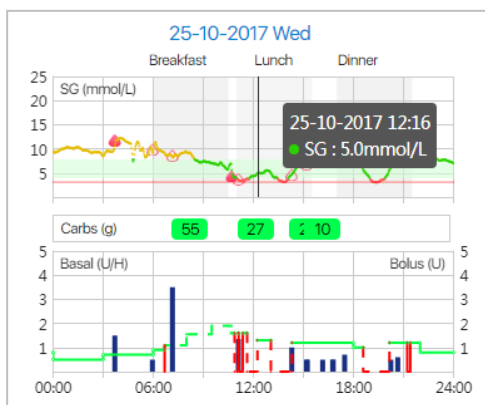

Možete da podesite period klikom na **Set** (Postavi), i odabirom trajanja (7 ili 14 dana) i krajnjeg datuma.

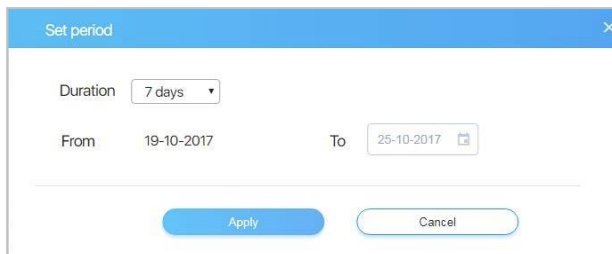

Set period

Duration 7 days

From 19-10-2017 To 25-10-2017

Apply Cancel


Možete da odštampate ovaj izvještaj jednostavnim klikom na **Print** (Štampaj).

5.4 Prozor senzora




Ovaj izvještaj prikazuje podatke sa senzora i očitavanja koncentracije glukoze sa glukometra tokom određenog broja dana (maksimum 7 dana) prije odabranog datuma. Sve krive glukoze sa senzora (SG) i glukometra se prikazuju u grafikonima koji se preklapaju tako da lako možete da vidite obrazac nivoa glukoze u određenom periodu. Ukoliko ga odštampate, takođe ćete vidjeti i dnevnu prosječnu koncentraciju SG, maksimalnu SG, minimalnu SG, i broj epizoda hipoglikemije...

Izveštaji

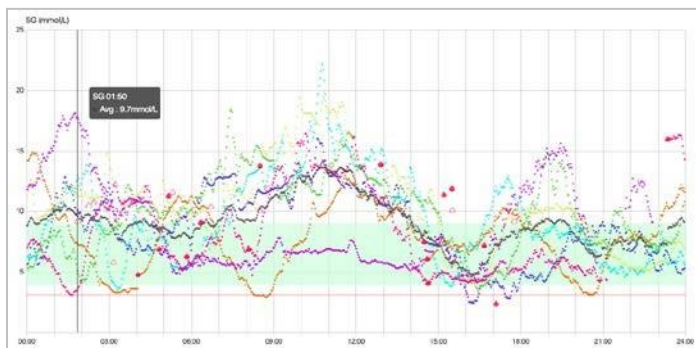

Date	Avg	Min	Max	# of Hypo
01-11-2019	9.5	3.5	22.2	0
02-11-2019	8.7	2.4	16	2
03-11-2019	9.9	3.4	18.4	0
04-11-2019	10.4	4.2	19.4	0
05-11-2019	8.3	3.1	16.4	1
06-11-2019	7.9	2.9	14.9	2
07-11-2019	6.7	3.9	18.1	0
Overall	9.1	2.4	22.2	5

Pomijeranjem miša po krivama, možete vidjeti detaljnije informacije.

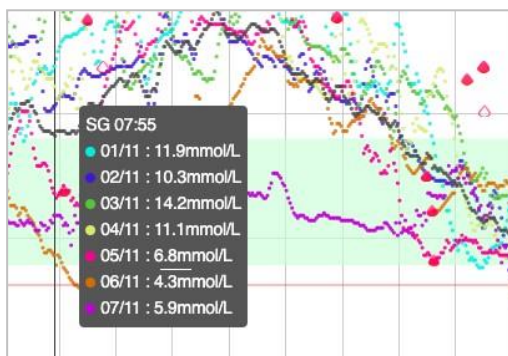

Možete da podesite period klikom na **Set** (Postavi), i odabirom krajnjeg datuma i broj dana koje želite da vidite.

Možete da odštampate ovaj izvještaj jednostavnim klikom na **Print** (Štampaj).

5.5 Analiza trendova



Ovaj izvještaj prikazuje grafikone trendova i statistike u okviru datog broja dana (maksimum 90 dana).

Grafikon i statistika trenda glukoze uključuje:

- Osnovne statistike
 - Avg: Prosjek svih očitavanja senzora.
 - Max: Najviše očitavanje senzora.
 - Min: Najniže očitavanje senzora.
 - Med: Srednja tačka svih očitavanja senzora.
 - Q1: 25% očitavanja senzora je niže od ove vrijednosti.
 - Q3: 75% očitavanja senzora je niže od ove vrijednosti.
 - IQR: Interkvartalni opseg (IQR) je razlika između Q1 i Q3.
 - SD: Standardna devijacija (SD) mjeri stepen varijabilnosti ili disperzije iz individualnih očitavanja senzora prema prosjeku.

- CV: Koeficijent varijacije (CV) je mjera relativne varijabilnosti.
- SE Mean: Srednja standardna greška mjeri koliko su raširena očitavanja senzora.
- Distribution %: Distribucija očitavanja senzora. Gornja i donja granica se podešavaju u podešavanjima izvještaja.
- Stabilnost:
 - AUC above limit: Oblast ispod krive (AUC) iznad limita je mjera visoke glukoze iznad gornje granice.
 - AUC below limit: AUC ispod limita je mjera niske glukoze ispod donje granice.
 - # of high / low: Pokazuje koliko puta su očitavanja senzora bila veća od gornje granice ili niža od donje granice.
- BG statistike
 - Avg: Prosjek svih očitavanja glukoze sa glukometrom (BG).
 - SD: Standardna devijacija (SD) mjeri stepen varijabilnosti ili disperzije iz individualnih očitavanja sa glukometra prema prosjeku.
 - # of Hypo: Pokazuje koliko puta su BG očitavanja bila ispod 3.1 mmol/L (56 mg/dL).
 - BG readings: Broj BG očitavanja.

Grafikon i statistika trenda insulina uključuje:

- Avg. Daily Total: Prosjek ukupne isporučene količine insulina po danu
- Avg. Daily Basal: Prosjek isporučenog dnevnog bazalnog insulina po danu
- Avg. Daily Bolus: Prosjek insulina isporučenog bolusima po danu

- Avg. # of bolus/Day: Prosječan broj isporučenih bolusa po danu
- Avg. bolus(U)/Each: Prosječan insulin isporučen po svakom bolusu

Statistika ugljenih hidrata uključuje:

- Carbs (g): Unos ugljenih hidrata
- # of meals: Broj obroka


Statistika vježbanja uključuje:

- Duration (min): Ukupno trajanje vježbanja
- # of Exercises: Broj vježbi



Pomijeranjem miša po krivama, možete vidjeti detaljnije informacije.

Izveštaji

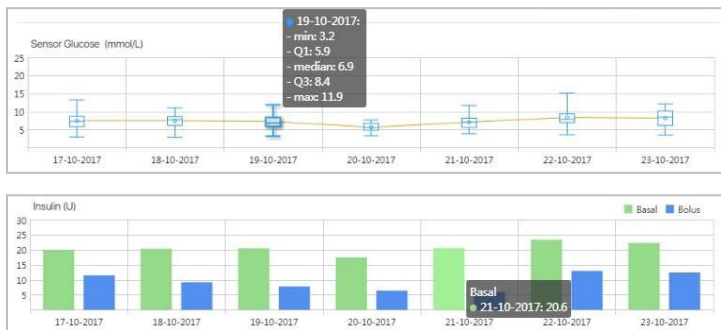

Možete da podesite period klikom na **Set** (Postavi), i odabirom trajanja, skale datuma, krajnjeg datuma i dana koje želite da vidite.


Možete da odštampate ovaj izvještaj jednostavnim klikom na **Print** (Štampaj).

5.6 Događaji




Ovdje možete da vidite i događaje zabilježene u Vašoj EasyTouch/ EasySense aplikaciji i one koji su zabilježeni u Vašem PDM uređaju ukoliko ste poslali podatke sa PDM-a na cloud.


Da biste kreirali novi događaj iz veb-sajta, kliknite na **Create** (Napravi), zabilježite događaj u prozoru koji će iskočiti, i potom kliknite na **Save** (Sačuvaj).

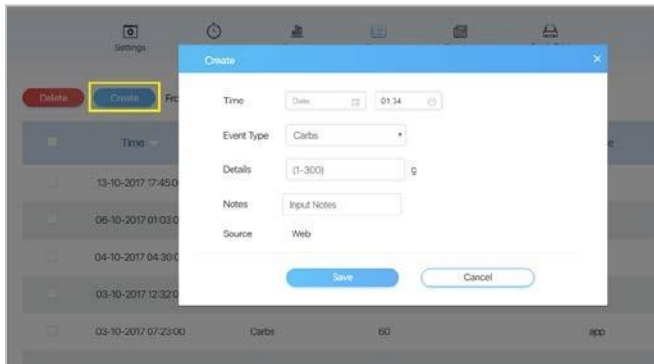

Da biste izmjenili postojeći događaj, kliknite na **Edit** (Izmjeni), napravite izmjene u prozoru, i potom kliknite na **Save** (Sačuvaj).

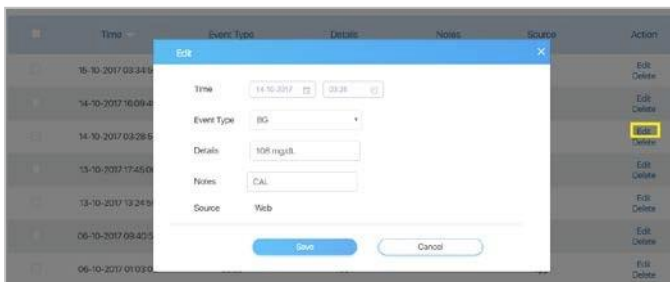


Da biste izbrisali događaje sa veb-sajta, označite ih i potom kliknite na **Delete** (Izbriši).

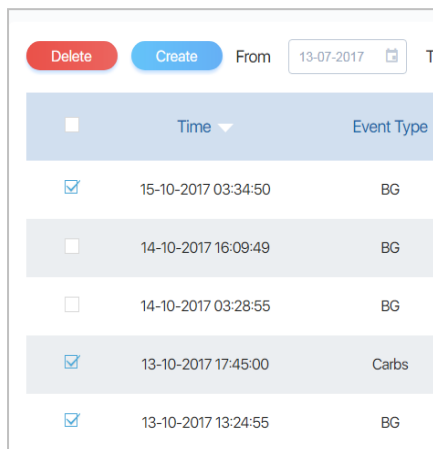

☐	Time	Event Type
☒	15-10-2017 03:34:50	BG
☐	14-10-2017 16:09:49	BG
☐	14-10-2017 03:28:55	BG
☒	13-10-2017 17:45:00	Carbs
☒	13-10-2017 13:24:55	BG

Možete da podesite period klikom na **Set** (Postavi), i potom odabirom krajnjeg datuma i broja dana koje želite da vidite.

Ukoliko želite da vidite samo jednu kategoriju događaja, kliknite na **Set** (Postavi) i koristite filter događaja:

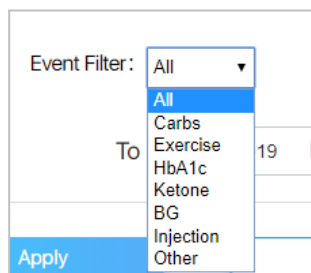

5.7 Dnevnik



Ovaj izvještaj predstavlja vrijednosti glukoze izmjerene glukometrom, bolus doze, status pumpe i druge događaje za svaki sat odabranog perioda.



Možete da pomijerate horizontalnu traku za pomijeranje kako biste vidjeli sve podatke u okviru 24 sata.


Možete da podesite period klikom na **Set** (Postavi), i potom odabirom krajnjeg datuma i broja dana koje želite da vidite.

Možete da odštampate ovaj izvještaj jednostavnim klikom na **Print** (Štampaj).

5.8 Upozorenja



Ovaj izveštaj prikazuje sva upozorenja PDM uređaja, pumpe i CGM za odabrani period.

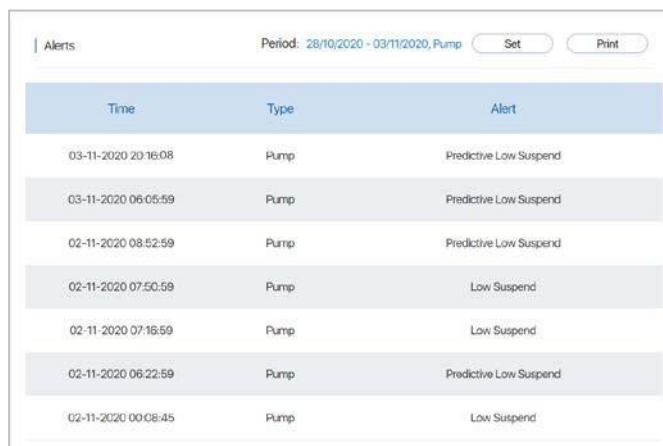

Time	Type	Alert
03-11-2020 20:16:08	Pump	Predictive Low Suspend
03-11-2020 06:05:59	Pump	Predictive Low Suspend
02-11-2020 08:52:59	Pump	Predictive Low Suspend
02-11-2020 07:50:59	Pump	Low Suspend
02-11-2020 07:16:59	Pump	Low Suspend
02-11-2020 06:22:59	Pump	Predictive Low Suspend
02-11-2020 00:08:45	Pump	Low Suspend

Možete da podesite period klikom na **Set** (Postavi), i potom odabirom krajnjeg datuma i broja dana koje želite da vidite.

Ukoliko želite da vidite samo jedan od tipova upozorenja i alarma, kliknite na **Set** (Postavi) i koristite filter upozorenja.

Set period

Duration: 7 days

Alert Filter: Pump

From: 28-10-2020

Apply Cancel

5.9 Pregled podešavanja uređaja

Dashboard Daily Summary Day by Day Overview Sensor Overlay Trend Analysis Events

Logbook Alert Device Settings Review

Ovaj izveštaj prikazuje podešavanja pumpe i CGM-a za odabrani dan. Dodatno, podešavanja PDM-a ili aplikacije se prikazuju u zavisnosti od izvora podataka koji je selektovan.

Izvještaji



Standard				24h Total: 25.70U/H
Start	00:00	06:30	12:30	21:00
U/H	0.65	1.3	1.15	1.3
Exercise				24h Total: 0.00U/H
Start	00:00			
U/H	0			
Holiday				24h Total: 0.00U/H
Start	00:00			
U/H	0			
Program A				24h Total: 0.00U/H
Start	00:00			
U/H	0			
Program B				24h Total: 0.00U/H
Start	00:00			
U/H	0			

Bolus

Maximum Bolus: 25U		Bolus Increment: 0.05U		Bolus Calculator: On	
Combo/Ext Bolus: On		BG Reminder: Off		Active Insulin Time: 3H	
IC Ratios(g/U)					
Start	48	--	--	--	
Carbs	15	--	--	--	
Insulin Sensitivity mmol/L					
Start	48	--	--	--	
BG	2.8	--	--	--	
BG Target					
From	48	--	--	--	
Range	5.6-5.6	--	--	--	
Bolus Reminder (Off)					
From	--	--	--	--	
To	--	--	--	--	

Izvjestaji

CGM

Glucose Alerts: On
Alert Silence: Off

Glucose Limits

From	48	--	--	--
Low	4.4	--	--	--
High	13.3	--	--	--

Predictive Alerts (h:mm)

High	Off	--
Low	Off	--

Rate Alerts (mmol/L/min)

Rise	Off	--
Fall	Off	--

Snooze (h:mm)

High	Off	--
Low	Off	--

Calibration

Calibration Reminder	Off	--
Calibration Repeat	01:00	
Graph Range	24H	

PCM

Audio Options: Audio+Vibrate	Patch Expiration: On 2H	Sensor Expiration: Off
Low Reserve: Insulin 10U	Auto Off: Off	Confidence Reminder: On
Hourly Max: 25U	Daily Max: 80U	Low Suspend: On 3.5mmol/L
Predictive Low Suspend: On 00:35 min	Out Of Range: --	

Time Format: 24H	Username: 0703054461	Display Settings (Screen): 60sec
Display Settings (Backlight): 60sec	Device Options (CGM System): On	Device Options (Insulin Pump): On
Glucose Unit: mmol/L	Alarm Clock: Off	Telephone: --

Alarm Clock (Off)

Time	--	--	--
Repeat	--	--	--

APP

Name: Martin	Audio Option: Off	Glucose Unit: mmol/L
Weight Unit: kg	Height Unit: cm	

Možete da promijenite podešavanja uređaja klikom na **Set** (Postavi) i odabirom jednog.

Device Settings Review

	Time	Source
☐	21-12-2019 20:14:39	F2673846
☐	15-12-2019 08:06:01	F2673846
☐	02-12-2019 07:35:27	F2673846
☐	02-12-2019 05:47:39	F2673846
☐	01-12-2019 19:25:49	F2673846
☐	30-11-2019 08:34:59	F2673846
☒	07-11-2020 05:22:53	F2673846

< 1 of 13 >

Apply

Cancel

Možete da odštampate ovaj izvještaj jednostavnim klikom na **Print** (Štampaj).

Kliknite na **Records** (Zapisi) na plavoj liniji kako biste prikazali ekran zapisa.

Ovdje ćete pronaći medicinske izvještaje, ako postoje, koje je Vaš lijeekar unio.



Ukoliko je Vaš nalog povezan sa nalogom Vašeg lijeakara, i ukoliko je on unio Vaše medicinske zapise na Medtrum EasyView veb-sajtu, ovdje ćete vidjeti Vaše zapise.

Vi ne možete da mijenjate Vaše medicinske zapise.

Records
Print

Profile:

Username	Name	Age	Height	Weight	Type of diabetes	Duration
Green@medtrum.com	Green	28	184 cm		Type 1	

Complications:
Create

Concomitant diseases	Date of diagnosis	Suggestions	Action

Prescription:
Create

Medicine	Dose	Notes	Action

Other suggestions:

From
17-8-2017
To
17-8-2017
Create

HCP	Date	Suggestions	Action

Brzo štampanje

Kliknite na **Quick Print** (Brza štampa) na plavoj liniji da biste prikazali ekran za brzo štampanje.



Na ovom ekranu možete brzo da odštampate različite izvještaje; odaberite trajanje, početni datum, krajnji datum, i dane koje želite da vidite, označite izvještaje koje želite da štampate, i kliknite na **Create Report** (Kreiraj izvještaj) da ih sve odštampate.

Quick Print

Quick Print Settings:

Select duration: One Week

End date: Yesterday Period: 29/10/2020 - 04/11/2020

Week Filter:

☒ Weekdays ☒ Mon ☒ Tue ☒ Wed ☒ Thu ☒ Fri

☒ Weekends ☒ Sat ☒ Sun

Select reports to print:

☒ All


☒ Dashboard	From: 29-10-2020 To: 04-11-2020
☒ Daily Summary	From: 29-10-2020 To: 04-11-2020
☒ Day by Day Overview	From: 29-10-2020 To: 04-11-2020
☒ Sensor Overlay	From: 29-10-2020 To: 04-11-2020
☒ Trend Analysis	From: 29-10-2020 To: 04-11-2020
☒ Logbook	From: 29-10-2020 To: 04-11-2020
☒ Event Summary	From: 29-10-2020 To: 04-11-2020
☒ Alert	From: 29-10-2020 To: 04-11-2020
☒ Device Settings Review	From: 29-10-2020 To: 04-11-2020

Create Report

Kliknite na strelicu u gornjem desnom uglu i pojaviće se padajući meni.



Ukoliko vidite crvenu tačku, to znači da Vam je neko poslao zahtjev za konekciju.

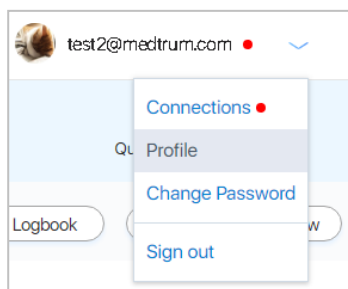


8.1 Konekcije


Kliknite na **Connections** (Konekcije) u padajućem meniju kako biste prikazali ekran konekcija.

Ukoliko je Vaš lijeekar i/ili neko iz Vaše porodice zatražio da se poveže sa Vama, ovdje ćete vidjeti sve zahtjeve. Možete da odaberete **Agree** (Prihvatam) ili **Deny** (Odbijam).


Konekcije, profil i šifra

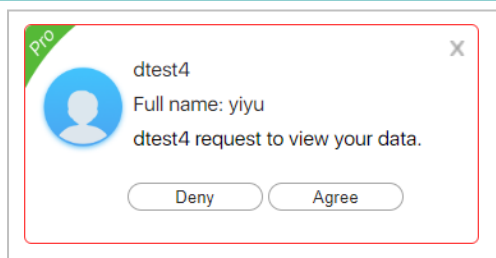

Ukoliko ste odabrali da prihvatite zahtjev, ta osoba će imati pristup podacima sa Vašeg uređaja.

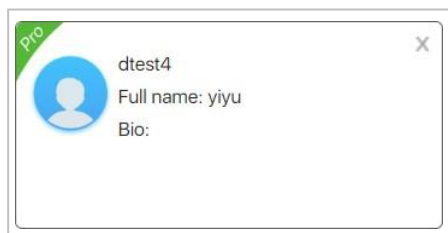

Ukoliko želite da izbrišete konekciju, jednostavno kliknite na mali iks u gornjem desnom uglu kartice konekcije. Nakon toga, ta osoba više neće imati pristup podacima sa Vašeg uređaja.

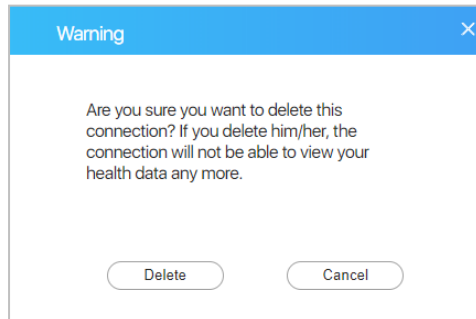

Vi ne možete da šaljete zahtjeve za povezivanje.

8.2 Profil

Kliknite na **Profile** (Profil) u padajućem meniju kako biste prikazali ekran profila. Ovdje možete da izmijenite Vaš lični profil.

A form titled "My profile" with a "Logout" link in the top right. The form contains the following fields: Username (text, value: test10@medtrum.com), Profile photo (icon), Full Name (text, value: Clair Simpson), Gender (dropdown, value: female), Height (text, value: 167, unit: cm), Weight (text, value: 65, unit: kg), Date of birth (calendar icon, value: 1970-01-01), Type of diabetes (dropdown, value: Type 1), Date of diagnosis (calendar icon, value: 1970-01-01), Address (three stacked text fields), Postcode (text field), Mobile (text field), Telephone (text field), Email (text field), and Bio (text field). At the bottom right are "Save" and "Cancel" buttons.

8.3 Promijena šifre

Kliknite na **Change Password** (Promijeni šifru) u padajućem meniju kako biste prikazali ekran za promijenu šifre.

Ovdje možete da postavite novu šifru za Vaš nalog.

